

Z
lipo



body contouring

feel the difference

Zlipo



25:50
-5°C

Zimmer
Medizintechnik


Nuestra experiencia para su éxito



Zimmer MedizinSysteme: Cryogenic Competence, Made in Germany

Con más de 45 años de experiencia, Zimmer MedizinSysteme de Neu-Ulm, Alemania, es un líder mundial en el campo de las aplicaciones médicas de aire frío.

La experiencia adquirida en más de 45.000 unidades vendidas de Cryo 5 y Cryo 6, dispositivos y cámaras innovadoras criogénicas Icelab de -110 °C para todo el cuerpo, se refleja en el nuevo sistema *Z Lipo Cryolipolysis*™ de Zimmer MedizinSysteme.

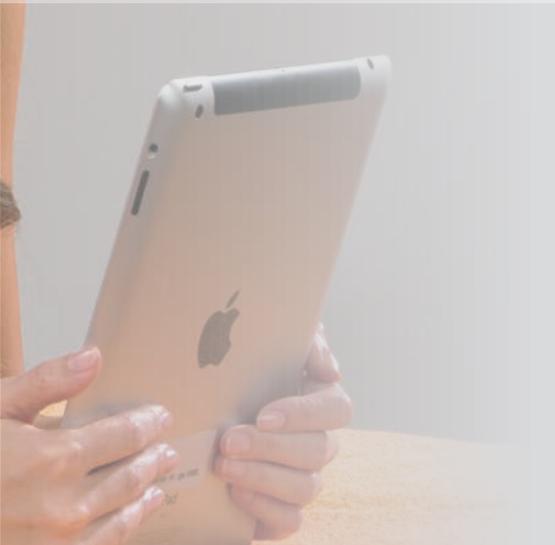



Envíe mensaje de frío a su depósito de grasa




Tecnología vanguardista

El sistema altamente innovador Cryolipolysis™ - Z Lipo hace ser posible combatir con los depósitos de grasa y reducirlos de forma permanente y no invasiva. Este método enfría depósitos de grasa durante un periodo más largo de tiempo en un rango de temperatura controlada y segura. Los estudios han demostrado una mejora significativa en los resultados mediante la combinación con el tratamiento de la onda de choque - ZWave^{Pro} de Zimmer MedizinSysteme.

Z Lipo – eficaz y fácil

Z Lipo convence por su simplicidad, manejo seguro y fácil. Sus diversos aplicadores de diferentes tamaños son perfectos para el tratamiento de todas las áreas del cuerpo de forma óptima. Protocolos de tratamientos individuales permiten a los usuarios a responder a las necesidades de cada paciente.

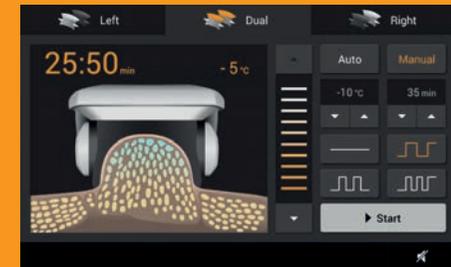


Z Lipo – Fases de tratamiento

Z Lipo – las fases de tratamiento se han desarrollado sobre la base de las últimas investigaciones y prometen mucho éxito en reducir los depósitos de grasa mediante el frío.


1. Inicio de Cryolipolysis™

Colocar el aplicador en la zona de tratar e iniciar el enfriamiento.

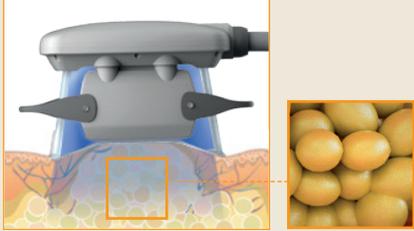


2. Reacción inmediata

Las células de grasa en la zona del tratamiento reaccionan al enfriamiento.

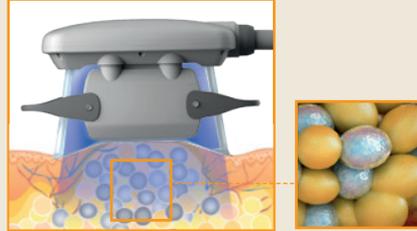

3. Eliminación de las células de grasa

Después del tratamiento, las células de grasa están eliminadas naturalmente.

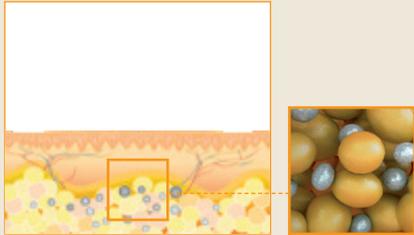

4. El resultado

Después de 8-12 semanas se puede observar el resultado final.



Flexible & seguro – garantiza la satisfacción del paciente

El aplicador para el sistema Z Lipo viene en tres tamaños para aplicar succión sin dolor a la zona de tratamiento deseado. Gracias al control preciso ofrecido por la pieza de mano, el área de tratamiento se enfría a la temperatura deseada.

La precisión de la temperatura seleccionada es un aspecto esencial del éxito del tratamiento y la seguridad.

La capacidad de utilizar de succión pulsante aumenta el efecto positivo sobre el drenaje linfático y el metabolismo. La intensidad se puede ajustar a uno de diez niveles diferentes que incluso se pueden ajustar durante el tratamiento.

Cryolipolysis™ – Cómo funciona

Cryolipolysis™ se dirige a los depósitos de grasa y los enfría de una manera controlada durante un período prolongado (por lo general de 60 minutos).

La eliminación selectiva de energía por medio de un tratamiento de frío causa la apoptosis de las células de grasa. En última instancia, esto conduce a su destrucción. La ruptura completa y la eliminación de las células grasas de forma natural a través del sistema linfático toma alrededor de 10-12 semanas.

Dado que el tejido circundante no responde al tratamiento de frío de la misma manera como el tejido graso, el tratamiento se considera como seguro, suave y no invasivo.

Para evitar daños en la piel, colocar un vellón especial sobre la zona durante el tratamiento.

Éxito del tratamiento:



Antes del tratamiento



Antes del tratamiento



8 semanas después



8 semanas después

Áreas de tratamiento:

- vientre
- caderas
- cintura
- espalda
- seno masculino
- muslos (interior/exterior)
- brazos flácidos
- glúteos



Z Lipo - enfriando su camino
a su cuerpo de sueño





Z Lipo, la última tecnología combinada con un diseño moderno

Como cabría de esperar del líder mundial en soluciones de crioterapia, el Z Lipo está basado en las últimas investigaciones y tecnologías. La máxima funcionalidad y diseño moderno cumplen todos los requisitos de una consulta vanguardista.

Cuenta con dos soportes laterales para guardar las piezas de mano, además de una bandeja en la parte superior de la unidad para guardar los accesorios.

Fácil con resultados rápidos

El software moderno de Z Lipo de Zimmer MedizinSysteme ofrece un rango amplio de opciones para el tratamiento simple e individual. Pantalla táctil de 10.2" de color permite al usuario ajustar el tiempo de aplicación, nivel de succión, modo de succión (continuo o pulsado) de forma segura e intuitiva. Los parámetros seleccionados se muestran en la pantalla durante el tratamiento. Además de los ajustes preestablecidos, el usuario puede crear sus propios programas de tratamientos.

Temperatura ajustable Individualmente, el vacuum constante o pulsado, con Z Lipo, todo es posible.




Z Lipo - Diseño y funcionalidad



Z Lipo – destacados

- Diseño moderno
- Coste de tratamiento bajo
- Uso simultáneo de dos aplicadores
- Manejo fácil, el software individualmente ajustable
- 10.2" pantalla táctil a color
- Rango de temperature ajustable de 5° a -10°C
- Succión vacuum constante o pulsado
- 10 niveles de succión vacuum disponibles
- Hasta 3 secciones de tratamiento en un solo ciclo de aplicación con diferentes ajustes de la unidad
- Duración de tratamiento de libre selección (máx 60 min.)
- Tratamiento se puede iniciar en el aplicador

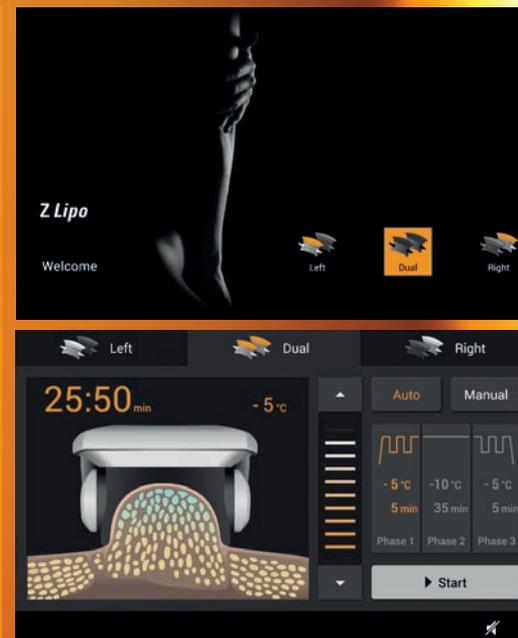

Z Lipo & Z Wave^{Pro} - la combinación fría

Incrementa el éxito

Combinando Z Lipo y Z Wave^{Pro} (CryolipolysisTM y onda de choque) ofrecemos una combinación perfecta de tratamiento para una mejora significativa en la reducción de la grasa.


Los estudios han demostrado que un tratamiento intensivo, sin dolor, de la onda de choque después de CryolipolysisTM aseguran no solamente una mayor pérdida de grasa, sino que también estimula el drenaje linfático y tensa la piel.

Dos sistemas, un concepto

Los pacientes son cada vez más exigentes y se informan a sí mismos antes de los tratamientos. Por esta razón, es cada vez más importante, para las consultas modernas, ofrecer no sólo los tratamientos individuales, sino conceptos de tratamiento complejo. Con Z Lipo y Z Wave^{Pro} este concepto hace posible captar nuevos grupos de clientes. Los principales operadores del mundo han estado utilizando este concepto durante mucho tiempo.



CryolipolysisTM v.s. CryolipolysisTM y ZWave

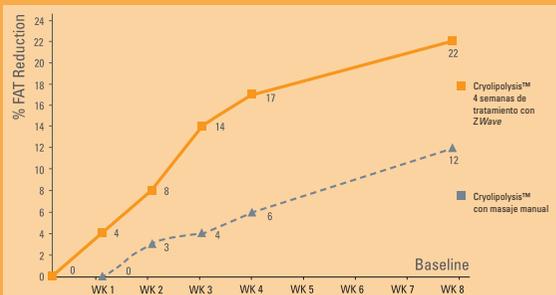

Study by: Jeffrey A. Hunt

Las diferencias entre el masaje manual vs. ZWave^{Pro}



Photo Courtesy of Dr. John Shieh, South Pasadena, CA

Flexibilidad para su consulta

Z Wave^{Pro} también tiene éxito como un tratamiento individual para la celulitis, debilidad de tejido conectivo y endurecimiento general de la piel.

Z Wave^{Pro} tiene éxito en combinación con CryolipolysisTM, radiofrecuencia, terapia de ultrasonido y láser suave.

Los buenos resultados incluso se han visto con tratamientos de la cicatriz.



Zimmer

40:58

Datos técnicos



Tecnología	unidad de refrigeración con la tecnología de enfriamiento de panel
Programas	programas de ajuste libre o programas estándar
Controlador	10.2" pantalla táctil a color
Aplicadores	aplicadores disponibles en tamaños S, M y L
Succión	hasta alrededor de 250 mmHg, 10 niveles de succión
Updates	USB puerto para servicio y actualizaciones
Voltaje	100 V/220 - 240 V, 50/60 Hz Cumple con los requisitos de la Directiva de baja tensión 2006/95/EC
Clase de protección	I
Dimensiones, peso	W 665 mm / D 629 mm / H 1082 mm, aprox. 84 kg (con aplicadores)