



ASTERASYS

Liftera 2

Ultrasonido focalizado de alta intensidad
para Lifting facial



¿Por qué Liftera 2?

¿Por qué Liftera 2?

Liftera 2 es un tratamiento no invasivo para lifting y contorno de rostro y áreas del cuello, que utiliza con precisión y eficiencia la tecnología de difusión térmica (TDT™).

Un tratamiento basado en extensas investigaciones, **Liftera 2** entrega la cantidad justa de energía térmica a la piel para lograr resultados impresionantes de lifting facial y tensado de la piel.

Comparado con los mecanismos convencionales, Liftera 2 es menos doloroso para los pacientes, y puede mostrar resultados inmediatamente después o al mes de realizarse el tratamiento.

Lifting y tensado facial


Las capas dérmicas y SMAS de la piel se tratan mediante calentamiento térmico microfocalizado para inducir la contracción o neocolagénesis de la piel.

El poder de TDT™

La última tecnología antienvjecimiento para estimular la formación del colágeno a través de la concentración de un potente pero estable efecto de calor en las fibras de colágeno dérmicas.

Gracias a la tecnología TDT (Tratamiento de Difusión Térmica), el aplicador de Liftera 2 puede alcanzar profundidades específicas de la piel, a una velocidad mayor de 10 Hz, sin dañar los tejidos cutáneos circundantes ni la epidermis.


El diseño del aplicador además permite realizar técnicas de movimiento fáciles y efectivas durante los tratamientos, particularmente en las zonas curvas del contorno facial.

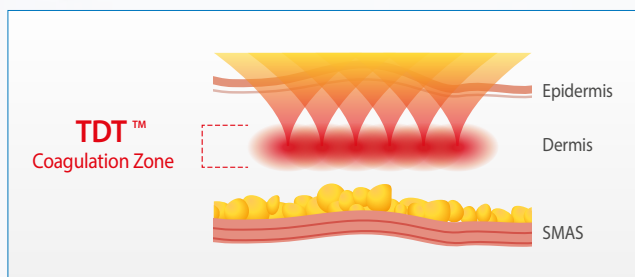


La ciencia detrás del Liftera 2

TDIP™(Thermal Diffusion In Pulse)

Un mecanismo avanzado e innovador que produce una potencia máxima ideal para la coagulación térmica.

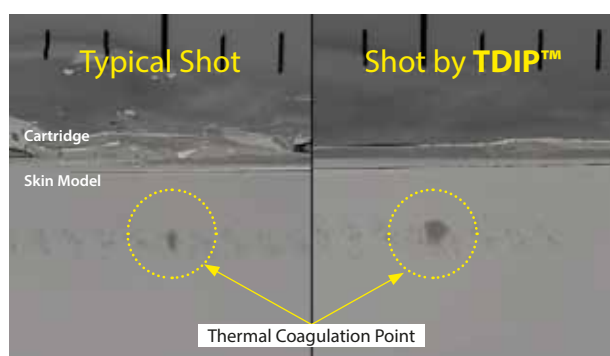

Thermal Coagulation Point

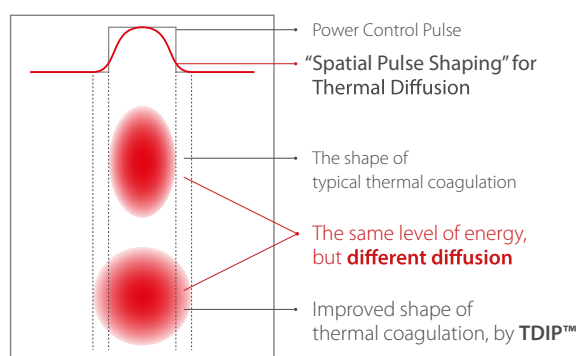


Thermal Coagulation Comparison

Calentamiento térmico con precisión

El transductor rediseñado de Liftera 2 ha sido creado con la misión de ofrecer impresionantes resultados clínicos para Lifting facial y tensado del cuerpo.

Sin causar ningún efecto/reacción adversa. Liftera 2 puede irradiar calor térmico en las capas de grasa subcutánea a 65° C o más.

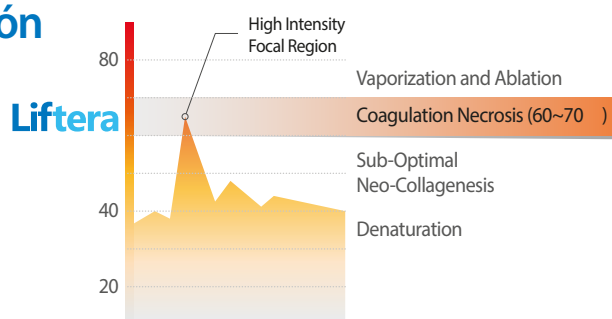


Máxima potencia

Liftera 2 está diseñado para entregar una máxima potencia con eficacia y estabilidad.

Una configuración de la potencia máxima demasiado alta o demasiado baja, puede producir resultados clínicos no favorables, incluyendo casos de leve o nulo Lifting, o de daño de los tejidos circundantes.

Sin embargo, el ajuste de la potencia máxima del Liftera 2, está configurado para mejorar el lifting y el tensado con resultados de energía térmica alta que produce poco o nada de dolor, y un menor tiempo de recuperación para el paciente.

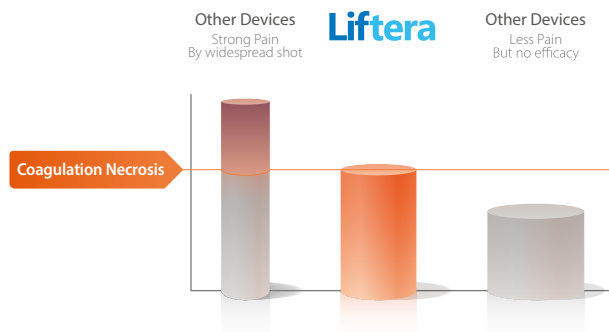



Aplicador Pen

Tratamientos


El aplicador PEN de liftera 2, con su transductor de 8 mm de radio, permite a los usuarios tratar con un contacto mínimo pero preciso la superficie de la piel, en múltiples curvas y contornos del rostro.

Diseño curvo

Introduciendo a las investigaciones de laboratorio, el aplicador PEN del Liferta 2 ha sido diseñado para llegar a superficies planas y a un amplio rango de áreas curvas de la piel. Adicionalmente, los usuarios pueden aplicar varias técnicas de movimiento, como frotamiento, administrando la energía adecuada al hacer contacto en las áreas a tratar.

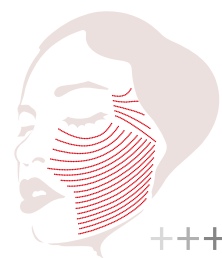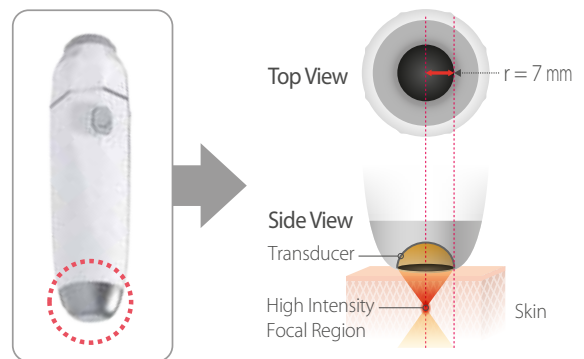



Liftera Lifting
(Curve line shot procedure)

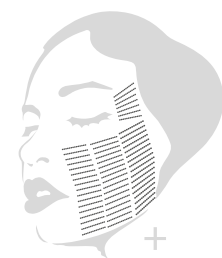

Straight line shot
procedure

Maximizando la comodidad del usuario


Equipados con el aplicador tipo lápiz, los profesionales pueden realizar sesiones más rápidas y combinar tratamientos que maximizan el potencial y los resultados clínicos del Liferta 2.

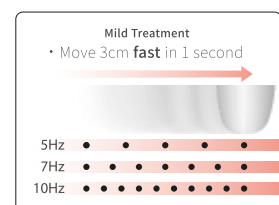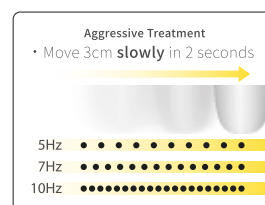

La Próxima generación

El nuevo “Line Cartridge”

El perfil de disparo bidireccional y continuo del Liftera 2, forma consistentes puntos de coagulación térmicas, manteniendo un alto rendimiento, y sesiones más cortas, reduciendo a la mitad el tiempo de tratamiento.

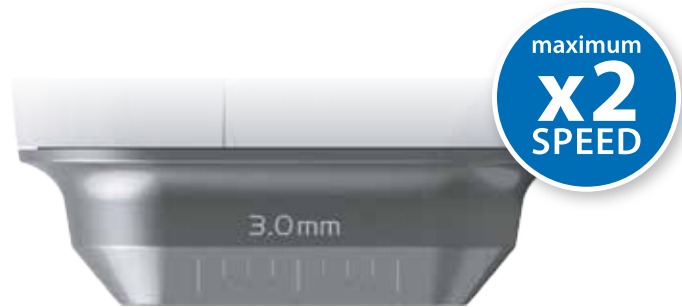

 Bidirectional & Adjustable Interval

Aplicadores para el Lifting Facial

Equipado con la última línea “PEN” y “LINE”, llegando a múltiples profundidades determinadas con precisión, Liftera 2 puede lograr un lifting facial efectivo para todo el rostro, incluyendo frente, contorno ojos, mejillas, boca y mentón. Además, Liftera 2 puede abordar un lifting periorbitario, con resultados tan impresionantes como los de los pacientes sometidos a procedimientos invasivos.

Pen Applicators




1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 mm

&

Line Cartridges




1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 mm

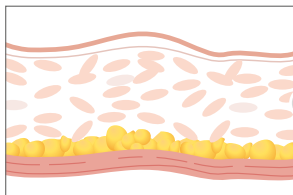


Target: envejecimiento de la piel

El tratamiento es ideal para pacientes con piel que carece de firmeza y elasticidad en las capas dérmicas superiores e inferiores y en el SMAS.

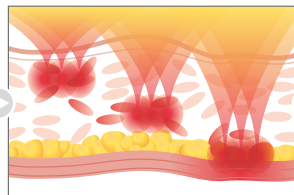


Cómo funciona el tratamiento

La energía de ultrasonido, en forma de energía térmica a 65 °C y 10 MHz, se irradia en las capas cutáneas a tratar mediante múltiples técnicas de movimiento para crear zonas de coagulación.

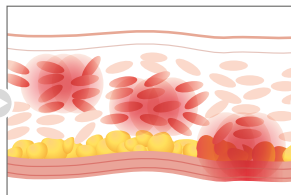

Reacción posterior

Tras el tratamiento, la capa SMAS objetivo se contrae y las zonas de coagulación en la dermis superior e inferior inducen la neocolagénesis, o el crecimiento de nuevo colágeno.

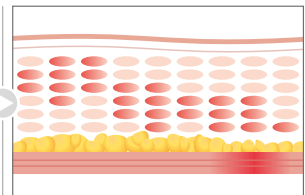

Lifting y tensado efectivo

Como resultado, Liftera 2 es adecuado para la remodelación efectiva del colágeno, la contracción del SMAS y la reducción de arrugas en el rostro.



Casos Clínicos



ANTES



DESPUÉS




ANTES



DESPUÉS



ANTES

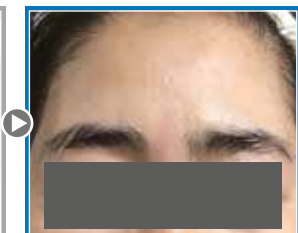

DESPUÉS



ANTES




DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

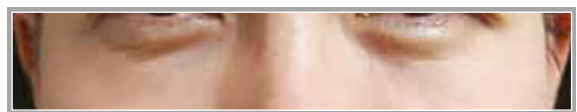

ANTES



DESPUÉS

Especificaciones

Modelo	Liftera-A2	
Tipo de producto	Ultrasonido focalizado de alta intensidad	
Clasificación	CLASS IIa	
Seguridad Eléctrica	Clase 1, Parte aplicada de tipo BF	
Salida del Ultrasonido	1 ~ 15 Niveles (1 nivel por paso)	
 Aplicador Velocidad de Irradiación (por seg.) 1 / 3 / 5 / 7 / 10 Hz	Aplicador	4 MHz / 4.5 mm
		7 MHz / 1.5, 3.0 mm
 Pieza de mano LINE Intervalo Espaciado Longitud	Cartucho	4 MHz / 4.5 mm
		7 MHz / 1.5, 3.0 mm
		0.1 ~ 1.0 seg. (0.1 seg. por paso)
		1.5 / 1.8 / 2.0 mm
		5.0 mm ~ 25 mm (5.0 mm step)
Interfaz de Usuario	Pantalla LCD 15" Táctil	
Dimensiones (A x P x A)	374 x 239 x 301 (mm)	
Entrada de Corriente	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	

* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
 * Lea las precauciones e instrucciones antes de su uso.



Interfaz de Usuario
Pieza de mano Line



Interfaz de Usuario
Aplicador Pen



Av. Córdoba 1351, Piso 12° (C1055AAD) Buenos Aires, Argentina
 Tel.: (54 11) 4816 4585 - www.sirexmedica.com
 f SirexMedica @ sirexmedica Sirexmedica in sirexmedica

